

Esperienza di ottica

Diffrazione

Arianna Genuardi, Matteo Romano, Vittorio Strano, Florinda Tesi

Indice

1	Introduzione	1
2	Strumentazione	1
2.1	Software	2
3	Procedimento	2
4	Risultati	2
5	Conclusioni	2

1 Introduzione

Questo esperimento vuole rilevare il carattere ondulatorio della luce tramite il fenomeno della **diffrazione**, causata dal passaggio del fascio di luce per una fenditura di dimensioni a comparabili alla sua lunghezza d'onda λ . Per far ciò verrà analizzata la figura d'interferenza formata su uno schermo a distanza L dalla fenditura (Figura 1).

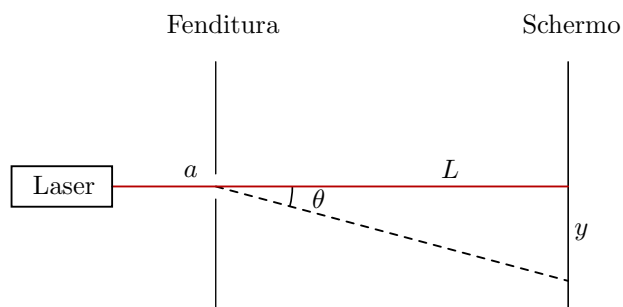


Figura 1: Illustrazione dell'apparato strumentale

La legge che descrive l'intensità della luce su un punto dello schermo a distanza y dal centro è l'Equazione 1.

$$I(y) = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda} \cdot \frac{y}{L} \right) \quad (1)$$

Per trovare i punti di minimo basta porre $\frac{ay}{\lambda L} \in \mathbb{Z}_{\setminus\{0\}}$ che può essere scritto come in Equazione 2.

$$y \in \left\{ m \frac{\lambda L}{a} : m \in \mathbb{Z}_{\setminus\{0\}} \right\} \quad (2)$$

2 Strumentazione

- **Laser** con lunghezza d'onda $\lambda = 650 \text{ nm}$

- **Fenditura** di larghezza variabile da 0.02, 0.04 e 0.08 mm
- **Guida con riga** di lunghezza pari a 1.2 m e risoluzione 1 mm, su cui montare i vari strumenti
- **Schermo** utile per centrare il laser orizzontalmente
- **Sensore mobile** in grado di campionare l'intensità luminosa con tre diverse scale oltre che la propria posizione relativa al punto di avvio della misurazione. Lo strumento è dotato di fenditura variabile 0.5, 1 e 1.5 mm
- **Interfaccia** per collegare il sensore ad un computer

2.1 Software

- Pasco Capstone per controllare l'interfaccia

3 Procedimento

L'esperienza consiste nel misurare la figura di diffrazione ottenuta, cambiando ogni volta la fenditura utilizzata, (consiste nel determinare l'intensità luminosa in funzione della posizione). Sistemato il laser all'estremo del supporto ottico sono state spente le luci della stanza e la tensione viene misurata in uscita del fotodiodo con uno oscilloscopio. Le misure vengono effettuate quando la differenza tra massimi e minimi sarà molto piccola. Il segnale può andare a saturazione quando supera la sensibilità del detector.

4 Risultati

5 Conclusioni